

# ***KRAFT&DELE***

PROFESSIONAL

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΑΣΑΖ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΆΚΡΕΣ**

**ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**



**KD-3080 / KD-3081 / KD-3082**

**ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ**


Αυτό το έγγραφο περιέχει οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας, καθώς και πληροφορίες εγγύησης.

Το έγγραφο μαζί με την απόδειξη αγοράς πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.



## ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ

1. Κινητήρας χωρίς ψήκτρες υψηλής ροπής με αθόρυβη τεχνολογία ολίσθησης
2. Αφαιρούμενος επιβραδυντής μπαταρίας
3. Επαναφορτιζόμενη λι-ιονική μπαταρία (περισσότερο από 2 ώρες λειτουργίας με μία μόνο φόρτιση)
4. Ρυθμίσεις πολλαπλών ταχυτήτων για βέλτιστη πίεση
5. Ασύρματο και ελαφρύ (2,5 λίβρες)
6. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
7. Εναλλάξιμοι εφαρμοστές

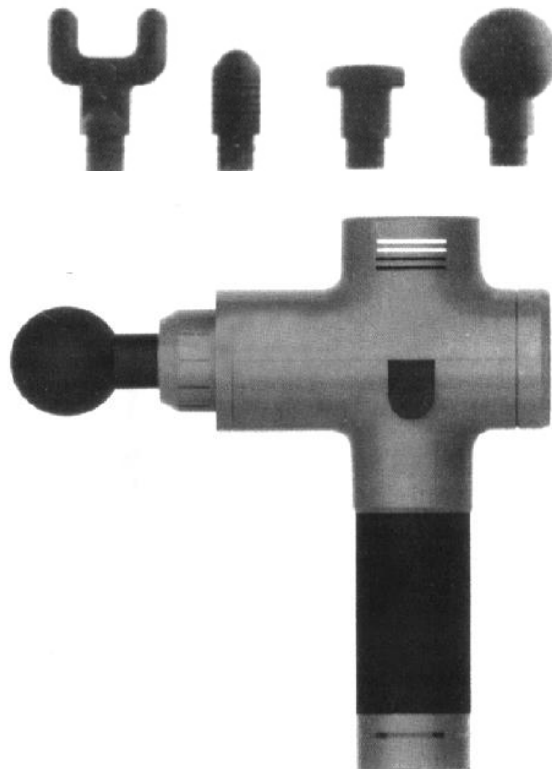

| MODEL   | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>KD-3080</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 20 διαφορετικές ταχύτητες</li> <li>2. Ισχύς 250W</li> <li>3. Μπαταρία ιόντων λιθίου</li> <li>4. Αμπλυτούδα 12mm</li> <li>5. Χρόνος φόρτισης έως 60 λεπτά</li> <li>6. Χρόνος λειτουργίας έως 6h – ανάλογα με τη δύναμη πίεσης, την ταχύτητα</li> <li>7. Θόρυβος 45-65db</li> <li>8. Οθόνη LCD</li> <li>9. 6 εναλλάξιμες συμβουλές + 2 δωρεάν: Σχήμα U, επίπεδο, κουπί, πριόνι, μπάλα XL, σφαίρα, πνευματική άκρη, τόξο</li> <li>10. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό <ul style="list-style-type: none"> <li>• Θήκη αποθήκευσης</li> </ul> </li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>KD-3081</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30 διαφορετικές ταχύτητες</li> <li>2. Ισχύς 125W</li> <li>3. Μπαταρία ιόντων λιθίου</li> <li>4. Αμπλυτούδα 12mm</li> <li>5. Χρόνος φόρτισης έως 1-1,5 ώρα</li> <li>6. Χρόνος λειτουργίας έως 6h – ανάλογα με τη δύναμη πίεσης, την ταχύτητα</li> <li>7. Θόρυβος 45db</li> <li>8. Οθόνη LCD <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 εναλλάξιμες κεφαλές: στρογγυλό μικρό, κουπί, διπλό, σφαίρα, θέρμανση, αέρας, επίπεδο, σημείο, ημισέληνος</li> </ul> </li> </ol>  |
| <p style="text-align: center;"><b>KD-3082</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30 διαφορετικές ταχύτητες</li> <li>2. Ισχύς 125W</li> <li>3. Μπαταρία ιόντων λιθίου</li> <li>4. Αμπλυτούδα 12mm</li> <li>5. Χρόνος φόρτισης 1-1,5 ώρες</li> <li>6. Χρόνος λειτουργίας από 1 έως 6 ώρες – ανάλογα με τη δύναμη πίεσης, την ταχύτητα</li> <li>7. Θόρυβος 45db</li> <li>8. Οθόνη LCD</li> <li>9. 8 διαφορετικές συμβουλές: σχήμα U, επίπεδο, κουπί, μπάλα, φελλός, σφαίρα, πνευματικό, τόξο <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> </li> </ol>   |

## **ΦΟΡΤΩΣΗ**

- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία για έως και έξι ώρες πριν από την πρώτη χρήση μετά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση από τη συσκευή
- Για φόρτιση, συνδέστε το άκρο DC του παρεχόμενου τροφοδοτικού 24V στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας και συνδέστε το πλευρικό καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου
- Η μπάρα LED στην ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας ανάβει παλμούς για να υποδείξει τη στάθμη της μπαταρίας και να υποδείξει ενεργή φόρτιση.
- Όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη, οι λυχνίες LED στη μονάδα αναβοσβήνουν για να υποδείξουν τη στάθμη της μπαταρίας και την ενεργή φόρτιση.
- Μια πλήρης φόρτιση υποδεικνύεται όταν όλες οι λυχνίες LED σταματήσουν να αναβοσβήνουν και παραμένουν πλήρως φωτισμένες.
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί για μικρό χρονικό διάστημα και μέχρι η φόρτιση να είναι χαμηλή.
- Δεν συνιστάται η πλήρης αποφόρτιση της μπαταρίας στο επίπεδο της κόκκινης λυχνίας LED
- Ο μέσος χρόνος λειτουργίας είναι μεγαλύτερος από 2 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο ταχύτητας και πίεσης που εφαρμόζεται κατά τη χρήση.

## **ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

- Ευθυγραμμίστε και ασφαλίστε την μπαταρία στη βάση της συσκευής - βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλειδωμένη στη θέση της.
- Ενεργοποιήστε τη μονάδα σύροντας το διακόπτη τροφοδοσίας στο κάτω μέρος της μπαταρίας στη θέση ON. Απενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας το διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση OFF.
- Όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση ON, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να γυρίσετε τη μονάδα στο επίπεδο ένα, δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα στο επίπεδο δύο και τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε το επίπεδο τρία. Αν πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Οι μπλε λυχνίες LED θα υποδεικνύουν το κατάλληλο επίπεδο ισχύος.
- Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε πλήρως το απλικατέρ πιέζοντας. Αφαιρέστε τραβώντας προς τα έξω.
- Μεταδώστε το μήνυμα στο επιθυμητό μέρος του σώματος με την επιθυμητή ταχύτητα, ασκώντας πίεση όπως απαιτείται.
- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πιέστε απαλά το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας με τον αντίχειρά σας. Σταθερά κάτω στην μπαταρία / βάση με το άλλο χέρι.

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

- Χρησιμοποιήστε έναν ελαφρώς υγρό πύργο για να καθαρίσετε τη συσκευή και, στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί
- Για αποθήκευση ή ταξίδι, αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε την στο παρεχόμενο χαρτοκιβώτιο

## **ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην βυθίζετε στο νερό, κρατήστε μακριά από υγρά ή πηγές θερμότητας. Διατηρήστε τις θύρες εξαερισμού απαλλαγμένες από σκόνη και υπολείμματα
- Μην αφαιρείτε βίδες και μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από μία ώρα, αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά
- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την μπαταρία της μονάδας μετά τη φόρτιση ή πριν από τη χρήση
- Μόνο για ενήλικες. Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση τραυματισμού. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και τραυματισμού. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

- Μόνο για ενήλικες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μια στεγνή, καθαρή περιοχή του σώματος στα ρούχα, πιέζοντας ελαφρά και κινώντας πάνω από το σώμα για περίπου 60 δευτερόλεπτα στην πληγείσα περιοχή.
- Χρησιμοποιήστε hypervolt μόνο στους μαλακούς ιστούς του σώματος όπως απαιτείται, χωρίς να προκαλέσετε πόνο ή δυσφορία. Μην το χρησιμοποιείτε στην ακοή, το χέρι ή τα οστά στο σώμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απλικατέρ που παρέχουν το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Μώλωπες μπορεί να συμβούν ανεξάρτητα από τη ρύθμιση ελέγχου ή την πίεση που ασκείται. Ελέγχετε συχνά τις πληγείσες περιοχές και σταματήστε αμέσως με το πρώτο σημάδι πόνου ή δυσφορίας.
- Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά ή άλλα μέρη του σώματος μακριά από τη λαβή και το πίσω μέρος του απλικατέρ, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τσίμπημα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στα ανοίγματα εξαερισμού του πιστολιού μασάζ.
- Μην βυθίζετε σε νερό και μην αφήνετε το νερό να εισέλθει στα ανοίγματα εξαερισμού του πιστολιού μασάζ
- Μην ρίχνετε ή πλένετε το πιστόλι μασάζ
- Φόρτιση μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή πιστολιού μασάζ 26 VDC
- Επιθεωρήστε προσεκτικά τη συσκευή και την μπαταρία πριν από κάθε χρήση.
- Μην χειρίζεστε ή τροποποιείτε το πιστόλι μασάζ με οποιονδήποτε τρόπο.
- Ποτέ μην αφήνετε το πιστόλι πληροφοριών σε λειτουργία ή φόρτιση αποσυνδεδεμένο

Μην χρησιμοποιείτε πιστόλι μασάζ ή οποιαδήποτε συσκευή δόνησης χωρίς προηγούμενη ιατρική άδεια, εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες.

Εγκυμοσύνη, διαβήτης με επιπλοκές όπως νευροπάθεια ή βλάβη του αμφιβληστροειδούς, φθορά βηματοδοτών, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, επιληψία ή ημικρανίες. δισκοκήλη, σπονδυλολυτική σπονδυλολίση ή σπονδύλωση, πρόσφατες αντικαταστάσεις αρθρώσεων ή IUD. Οι αδύναμοι άνθρωποι και τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή δόνησης. Αυτές οι αντενδείξεις δεν σημαίνουν ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή δόνησης ή άσκησης, αλλά σας συμβουλεύουμε να συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας

Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τις επιπτώσεις της άσκησης κραδασμών σε συγκεκριμένες ιατρικές διαταραχές. Αυτό πιθανότατα θα συντομεύσει τον κατάλογο των αντενδείξεων όπως φαίνεται παραπάνω. Η πρακτική εμπειρία έχει δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις η ενσωμάτωση των ασκήσεων vibration σε ένα πραγματικό σχέδιο είναι συμβουλευτική. Αυτό πρέπει να γίνεται με τη συμβουλή και να συνοδεύεται από γιατρό, ειδικό ή φυσιοθεραπευτή.

## **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Σύμφωνα με τους οδηγούς ISO / IEC 22 και EN 45014

**Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή:** Foreintrade S.A

**Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:** JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

**ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ**

**Όνομα Προϊόντος:** Σύνολο πιστολιών μασάζ

**Πρότυπο:** KD3080 KD3081 KD3082

### **Δήλωση:**

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών ΕΚ:

1. Οδηγία EMC 2014/30/ΕΕ
2. Οδηγία ROHS 2 2011/65/ΕΕ
3. Οδηγία 2000/14/WE για τις εκπομπές θορύβου

### **Σύμφωνα με τα πρότυπα:**

EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Certyfikat o numerze PTC210511300701E-EM01 wydany przez Ακριβείς δοκιμές & πιστοποίηση Guangdong Co., Ltd (Building 1, no. 6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China) z 26 maja 2021.

Υπεύθυνος για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου: Ma Dong Hui· JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Μα Ντονγκ Χούι, TARCZYN, 16.06.2023