



Ευχαριστούμε που επιλέξατε το TaoTronics Massage Gun. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον Οδηγό χρήσης πριν από τη χρήση και φυλάξτε τον για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, όπως:

Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα εξαρτήματα και ανταλλακτικά.

Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση εκτός από τις συνιστώμενες.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή συλλογιστικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες από υπεύθυνο άτομο.

ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βρεγμένες επιφάνειες και μην εκθέτετε τον φορτιστή σε υγρασία, βροχή ή χιόνι.

ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν παρουσία εκρηκτικών ατμοσφαιρών (αέριοι αναθυμιάσεις, σκόνη ή εύφλεκτα υλικά). Μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες, προκαλώντας πιθανώς $i \rightarrow re$.

Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του φορτιστή είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην το πατήσετε, να σκοντάψει ή να υποστεί με άλλον τρόπο ζημιά ή πίεση. Αντικαταστήστε αμέσως έναν κατεστραμμένο φορτιστή.

ΜΗΝ βάζετε εμπόδια στους αεραγωγούς. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε εάν έχει φράξει οποιαδήποτε οπή εξαερισμού. Διατηρήστε απαλλαγμένο από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τον αέρα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα και τα ίχνη από αεραγωγούς και κινούμενα μέρη. Μην αφήνετε ποτέ την εσωτερική μπαταρία να έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα. Εάν μια κατεστραμμένη μπαταρία έχει διαρροή χημικών, χρησιμοποιήστε γάντια από καουτσούκ ή νεοπρένιο για να την απορρίψετε. Εάν το δέρμα εκτεθεί σε υγρά μπαταρίας, πλύνετε με σαπούνι και νερό και ξεπλύνετε με ξύδι. Εάν τα μάτια εκτεθούν σε χημικά της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό για 20

λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Αφαιρέστε και πετάξτε τα μολυσμένα

Χαρακτηριστικά

- ΜΗΝ λειτουργείτε κάτω από κουβέρτα και μαξιλάρι. Μπορεί να προκληθεί υπερβολική θέρμανση και να προκαλέσει \bar{I} -re, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν ή το φορτιστή σε σημείο που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή νεροχύτη. Μην το τοποθετείτε και μην το ρίχνετε σε νερό ή άλλο υγρό. Μην πιάνετε μια συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε. Η αποσυναρμολόγηση ή η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ηλεκτροπληξίας ή έκθεσης σε χημικά της μπαταρίας. Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν το προϊόν ή ο φορτιστής αποσυναρμολογηθεί ή εάν έχουν αφαιρεθεί εξαρτήματα.
- Εάν η μπαταρία ή ο φορτιστής δεν λειτουργεί σωστά, έχει δεχθεί ένα απότομο χτύπημα, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή πέσει στο νερό, ΜΗ χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για επισκευή ή σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Χαμηλός θόρυβος
- 10 Επίπεδα Έντασης
- Κινητήρας υψηλής ροπής
- 6 κεφαλές μασάζ
- ..
- Επαναφορτιζόμεν
η μπαταρία
- Ελαφρύ & Φορητό
- Ψηφιακή οθόνη



Είτε είστε αθλητής, φυσιοθεραπευτής ή άτομο που χρειάζεται ανακούφιση από την ένταση και τον πόνο, το Massage Gun παρέχει μια καινοτόμα, φυσική προσέγγιση για τη βελτίωση της σωματικής σας υγείας. Μπορεί να ανακουφίσει αποτελεσματικά τον πόνο που προκαλείται από τη συσσώρευση γαλακτικού οξέος μετά από έντονη άσκηση και να επιβραδύνει την ενόχληση των μυών όλων των ατόμων που κάθονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πιστόλι μασάζ βοηθά στα εξής:

Βελτιώνει τους μώλωπες, τα διαστρέμματα, τις καταπονήσεις και τους πόνους των μυών
Αυξάνει την κυκλοφορία και τη λεμφική ροή
Ανακουφίζει από μυϊκούς σπασμούς και δυσκαμψία
Μειώνει τη συσσώρευση γαλακτικού οξέος στους μύες
Ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα και τους μύες
Μυϊκή κόπωση, πόνος, σφίξιμο, πόνος και κόμποι
Αυξάνει την κινητικότητα των αρθρώσεων
Χαλάρωση και πάχυνση συνδετικού ιστού και περιτονίας

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x πιστόλι μασάζ TaoTronics (TT-PCA003)
- 6 x κεφαλές μασάζ
- 1 x Μετασχηματιστής ρεύματος
- 1 x Ταξιδιωτική θήκη
- 1 x Οδηγός χρήσης
- 1 x ευχαριστήρια κάρτα


Διάγραμμα προϊόντος

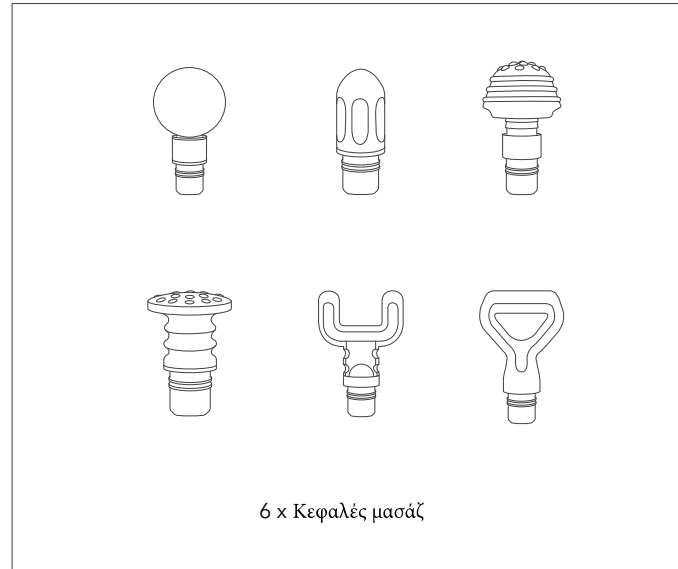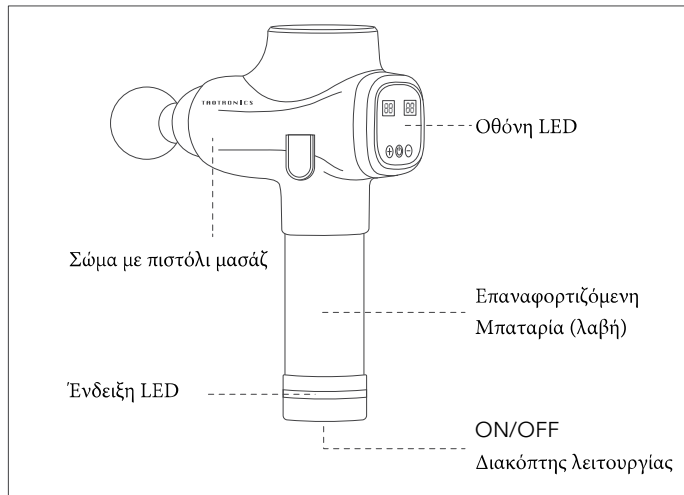


Προδιαγραφές

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Μοντέλο | TT-PCA003 |
| Ισχύς | 24W |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 2600mAh |
| Χρόνος φόρτισης | 4 ώρες |
| Ωρα εργασίας | 4 - 10 ώρες |
| Ρυθμιζόμενο επίπεδο | 10 Επίπεδα |
| Συχνότητα | 1400 - 3200 rpm |
| Επίπεδο θορύβου | 42 - 52dB |
| Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου | 12 mm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10~40°C / 14~104°F |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -25~60°C / -13~140°F |
| Διαστάσεις | 175*245*75 mm |
| Καθαρό βάρος | 0.98 kg |


Λειτουργία ελέγχου

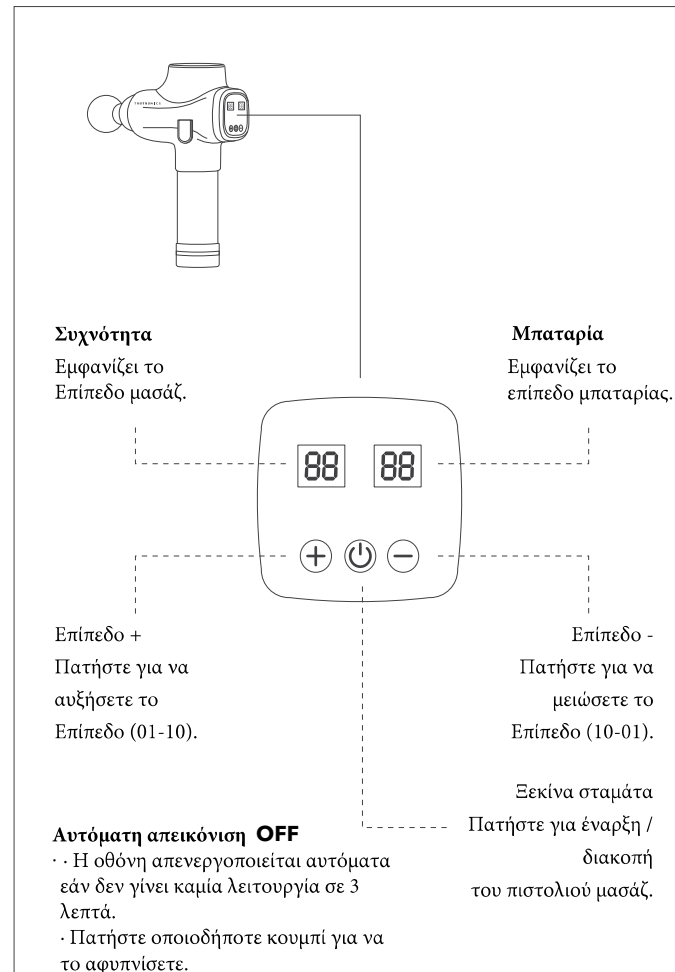


Κεφαλές μασάζ

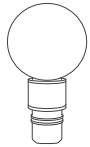


Σφαιρική Κεφαλή
για μεγάλες μυϊκές ομάδες
όπως μπράτσα, πλάτη,
γοφούς, μηρούς, γάμπες
κ.λπ.

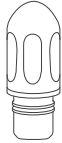


Κεφάλι σφαίρας
για πρόσκρουση σε εν τω
βάθει ιστούς όπως
αρθρώσεις, παλάμες και
πέλματα

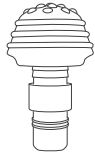

Μαλακή κεφαλή Air
Cushioning για ευαίσθητο
χαλάρωση των μυών

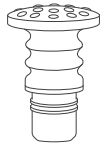

Επίπεδη κεφαλή
για μυϊκές ομάδες πλάτης

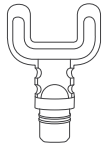

Κεφαλή σε σχήμα U
για λαμό,
σπονδυλική στήλη
και αχίλλειο τένοντα




Κεφάλι σε σχήμα D
για τους κοιλιακούς μύες

Φόρτιση

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο κάτω μέρος του πιστολιού μασάζ και, στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα. Η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.
2. Μόλις φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη στο πιστόλι μασάζ θα γίνει σταθερά πράσινη.

Κατάσταση μπαταρίας (Ένδειξη LED).

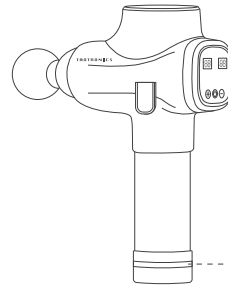

Μπλε LED: $\geq 40\%$
Κίτρινο LED: $\leq 40\%$
Κόκκινο LED: $\leq 20\%$

--- Ένδειξη LED

Σημείωση

- Φορτίστε πλήρως το πιστόλι μασάζ πριν από την πρώτη χρήση.
- Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή μόλις φορτιστεί πλήρως.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ($< 20\%$), φορτίστε την μπαταρία αμέσως.

Χρησιμοποιώντας το πιστόλι μασάζ

1. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ON/OFF στο κάτω μέρος στο ON.
2. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Διακοπή για να ξεκινήσει η λειτουργία του πιστολιού μασάζ.
3. Πατήστε το + ή - για να προσαρμόσετε τα επίπεδα έντασης από 1-10 ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις.
4. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αλλάξτε το διακόπτη ON/OFF σε OFF για να απενεργοποιήσετε το πιστόλι μασάζ.
5. Επανατοποθετήστε την κεφαλή μασάζ όταν το πιστόλι μασάζ είναι απενεργοποιημένο.

- 1. Ενεργοποιήστε το διακόπτη ON/OFF στο κάτω μέρος στο ON.
- 2. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Διακοπή για να ξεκινήσει η λειτουργία του πιστολιού μασάζ.
- 3. Πατήστε το + ή - για να προσαρμόσετε τα επίπεδα έντασης από 1-10 ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις.
- 4. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αλλάξτε το διακόπτη ON/OFF σε OFF για να απενεργοποιήσετε το πιστόλι μασάζ.
- 5. Επανατοποθετήστε την κεφαλή μασάζ όταν το πιστόλι μασάζ είναι απενεργοποιημένο.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Φροντίστε να απενεργοποιήσετε το πιστόλι μασάζ πριν τον καθαρίσετε.
Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε απαλά τις εξωτερικές επιφάνειες.
ΜΗ βυθίζετε σε νερό, φυλάξτε το μακριά από υγρά ή πηγές θερμότητας.